



Manual de instrucciones

Silla de ducha y servicio 'Flexo'

Importante

Lea bien primero estas instrucciones antes de utilizar el Flexo!

Fecha de puesta de servicio

.....

Usuario

.....

Nombre

.....

Dirección


.....

Manufactured by:

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl

Índice

Introducción	4
Seguridad	4
Frenado	5
Sentarse / Levantarse	5
Reposapiés plegable / desmontable	6
Reposabrazos	6
Cierre delantero con bloqueo	6
Subir / bajar	7
Uso del orinal / cubo	8
Uso con el wáter	8
Aseo	9
Mantenimiento	10
Datos técnicos	10

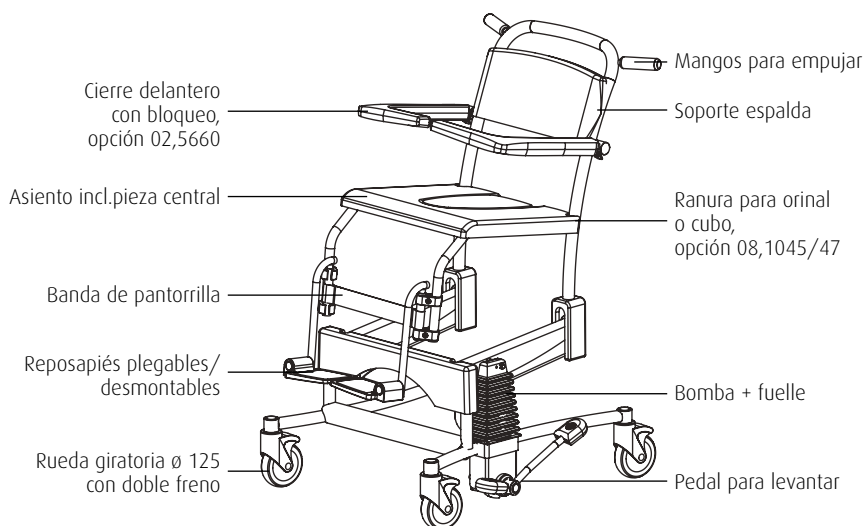

Introducción

La silla Flexo alta / baja para baño y ducha es una herramienta de ayuda para el cuidado y aseo de personas de forma ergonómicamente responsable. Tanto para el paciente como para el cuidador la comodidad es óptima.

El Flexo también se puede usar como silla retrete acoplando un orinal o cubo pero también en combinación con un wáter.

El Flexo se compone de una base de soporte y una silla. La parte de la silla es igual de cómoda y ofrece el mismo soporte inferior apropiado que una silla normal. En relación con la base de soporte, se puede regular la altura del asiento hidráulicamente. Así el Flexo tiene múltiples aplicaciones.

El modelo base cuenta con reposapiés plegables y desmontables y reposabrazos estándar. Además existen una serie de opciones, como un cierre delantero con bloqueo y un reposapiés desmontable.


El Flexo es un producto con el sello CE de conformidad. Este sello es conforme a las normas del 14 de junio de 1993 nº 93/42 EU para equipos médicos.

Seguridad

- Cuando se trasladan a los pacientes (a o desde la silla) el Flexo siempre tiene que estar con el freno puesto.
- Cuidado con los obstáculos en los movimientos hacia arriba/abajo.
- Para mover y maniobrar la silla hacerlo sólo en una posición baja.
- No subir o bajar la silla mientras está en movimiento.
- Subir los obstáculos preferiblemente de espaldas.
- Para el uso del wáter posicionar la silla a la altura correcta.
- Cierre los reposabrazos con cierre delantero para subir o ladear al paciente.
- En caso de averías póngase en contacto con su distribuidor.


Frenado

- Se puede poner el freno al Flexo empujando con el pie la lengüeta saliente (1) de la rueda.
- Para quitar el freno de Flexo hay que presionar hacia abajo la lengüeta levantada (2) sobre la rueda.

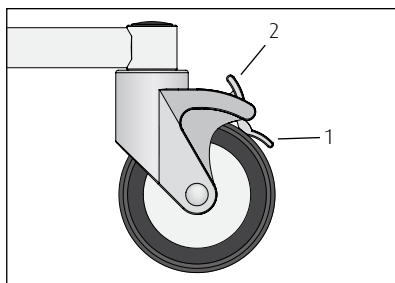


Sentarse / levantarse

- El cuidador abre los reposabrazos y los dobla si hace falta.
- El cuidador regula la altura del asiento, a medida del paciente.
- El cuidador pliega los reposapiés hacia arriba.
- El paciente está de pie y se sostiene apoyándose en por ejemplo una cama o una manija.
- El cuidador empuja el Flexo hacia el paciente hasta que la banda de la pantorrilla de la silla toque al paciente.
- Para realizar el traslado el Flexo tiene tener el freno puesto.
- El paciente se deja caer sobre el Flexo.
- Para levantarse realizar la operación a la inversa.

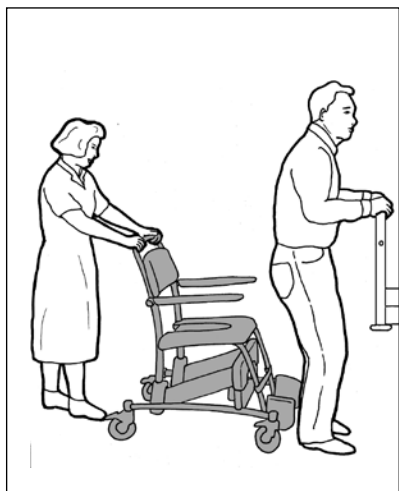

Reposapiés plegables/desmontables

- Antes de subir el Flexo, el cuidador baja los reposapiés.
- El cuidador o el paciente levanta primero una pierna, baja el correspondiente reposapiés; y a continuación repite la misma operación con la otra pierna.

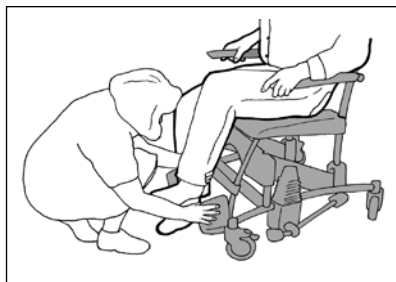


Cómo plegar los reposabrazos

Los reposabrazos con pliegue independiente son fáciles de plegar y protegen al paciente cuando se suben o bajan los reposabrazos.

Cuando están plegados no tienen porqué caerse, si es así consulte con su distribuidor.

Cierre delantero con bloqueo (opción 02,5660)

- Cuando el paciente esté en su sitio en el Flexo se bajan los reposabrazos con cierre delantero y se giran hacia el paciente.
- Los reposabrazos con cierre delantero se guardan en posición horizontal.
- Los reposabrazos se pueden desbloquear presionando el pestillo de seguridad del punto de articulación contra el marco (como en la figura), después se puede girar el reposabrazo hacia el paciente y plegarse hacia arriba.
- Proteja siempre al paciente cuando suba o baje los reposabrazos.
- Los reposabrazos se pueden utilizar también para apoyarse a la hora de sentarse o levantarse, en ese caso procure que los reposabrazos estén bloqueados y no giren en todas las direcciones.

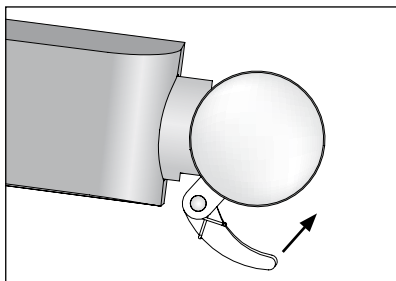


Atención: Cuando baje los reposabrazos evite el punto de articulación para que no se le queden atrapados los dedos.

Subir

- Cuando el paciente esté sentado en el Flexo, colocar primero el freno antes de subir la silla.
- El asiento se sube presionando la parte larga del pedal con movimientos pausados y regulares.
- Durante el movimiento del pedal el cuidador se coloca mirando hacia delante para que no tenga que girar el busto en relación con los pies.
- Cuando lo levante mantenga siempre contacto con el paciente.

Bajar

- Para bajarlo presionar la parte corta del pedal.
- El asiento se baja por la fuerza de la gravedad; puede regular la velocidad de bajada presionando el pedal ligeramente.
- Cuando lo suba mantenga siempre contacto con el paciente.

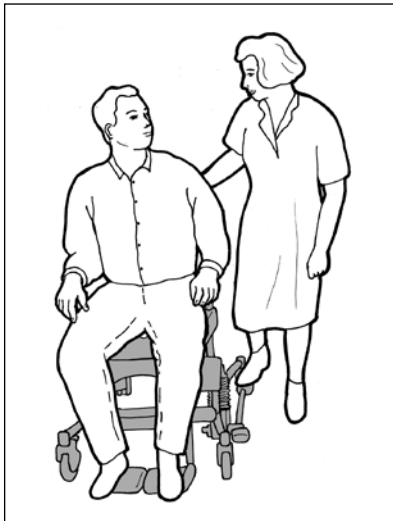

Observación: La velocidad de bajada también se puede controlar bien subiendo con el pie la parte larga del pedal

Uso del orinal/cubo

- Así se utiliza el Flexo como silla wáter se puede deslizar un orinal o cubo bajo el asiento en la ranura especial.
- El orinal o cubo se desliza por la parte trasera de la silla.

Para evitar heridas al paciente le aconsejamos que retire la tapadera de la silla y coloque el orinal o cubo antes de que se siente el paciente.



Uso con el wáter

- El Flexo también se puede colocar sobre el wáter. Cuando el paciente se haya sentado y los reposabrazos estén cerrados, el cuidador posiciona el Flexo a la altura correcta.
- El Flexo también se puede colocar sobre el wáter.
- Si hace falta, deje que el Flexo se baje hasta la posición correcta.


Para evitar heridas al paciente le aconsejamos que retire la tapadera de la silla y colocar el orinal o cubo antes de que se siente el paciente.



Observación: El Flexo no es apropiado para todas las tazas de wáter.

Aseo

- El que se puede regular la altura del Flexo supone para el cuidador una mejora ergonómica durante el cuidado y aseo del paciente.
- La altura regulable depende de la altura del cuidador.
- Ponga el Flexo en una posición baja para lavar la parte superior del cuerpo y el pelo.
- Suba el Flexo para lavar la parte inferior y las piernas.

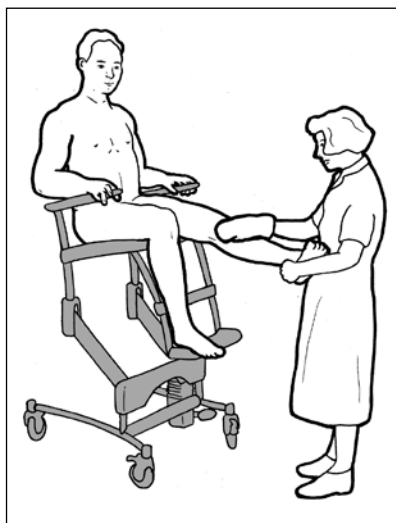

Mantenimiento

- Después de cada uso hay que limpiar el Flexo con agua y un producto normal de limpieza, no utilice ningún limpiador fuerte u otro producto abrasivo. (Como lejía)
- Si tiene que desinfectar el Flexo le recomendamos que utilice Neoquat combi®, pero nunca una solución con alcohol.
- Compruebe con regularidad si hay pelos o pelusas en las ruedas y retírelos si hace falta.
- Elimine restos de jabón.
- Lopital Nederland B.V. aconseja firmar un contrato anual de mantenimiento para el Flexo.
- Solamente el personal autorizado puede realizar el mantenimiento y la reparación.

Datos técnicos

Estructura

Marco de tubos y plancha de acero con doble capa de revestimiento

Puntos de articulación de acero inoxidable

Ruedas de plástico, Ø 125 mm, barra doble de bloqueo

Apoyo de cuerpo de poliuretano

Peso Flexo 40 kg

Carga máxima 135 Kg

Medidas

Superficie: 70 cm de ancho, 82 cm de fondo

Altura del asiento: Mínimo 50 cm, Máximo 105 cm

Pendiente asiento: Posición más baja: 3°, Posición más alta: 15°

Ángulo de cuña: 100°

Transmisión

Bomba hidráulica incorporada



Si desea más información, visite nuestro sitio web www.lopital.es

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

